

Installation av FrendaLink ImageBank 2

INNEHÅLL

1. **Konventioner i manualen** _____ 3
2. **Vad är FrendaLink** _____ 4
3. **Skapa ImageBank-kopplingen i Frenda** _____ 4

KONVENTIONER I MANUALEN

I manualen betecknar kursiva namn menyer/funktioner som finns i ImageBank.

Exempel: *Databas* = meny eller flik i programmet

I manualen betecknar namn med hakar knappar.

Exempel: [Ta bild] = Knapp i programmet

Ett val som sker i flera steg betecknas med →

Exempel: *Arkiv* → *Ange TWAIN-enhet*

Välj menyn Arkiv följt av menyn Ange Twain-enhet

VAD ÄR FRENDA LINK


FrendaLink är ett kopplingprogram mellan Frenda och ImageBank. Frenda kan skicka startparametrar till valt program såsom patientid, namn, personnummer etc. ImageBank kan via FrendaLink ladda patienten genom att matcha personnummer i databasen.

SKAPA IMAGEBANK-KOPPLINGEN I FRENDA


I Frenda

Steg:

1. Klicka på inställningar

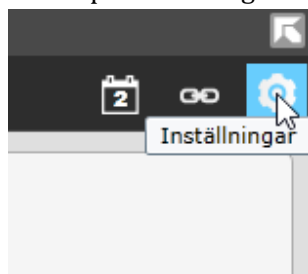

2. Klicka på *Kostnadsställe* → *Externa program*

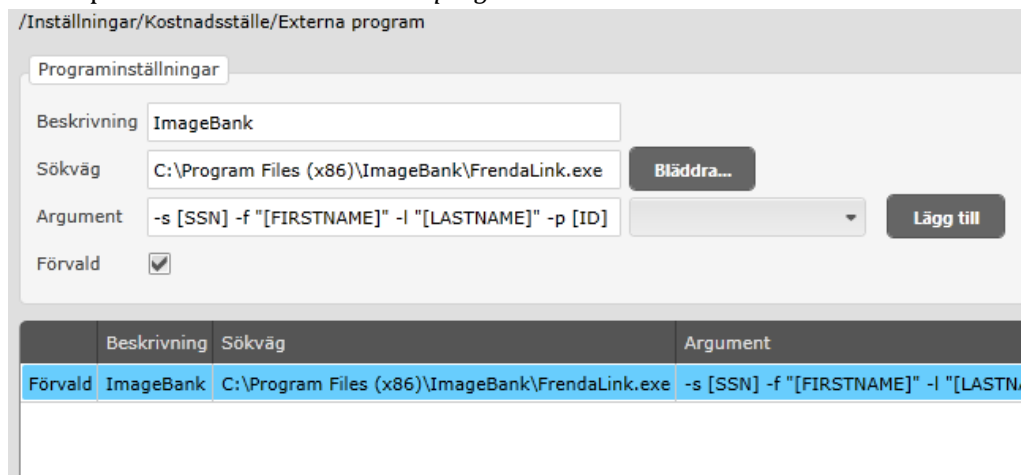

3. Fyll i en **beskrivning**, t ex ImageBank.
I "**Sökväg**", leta upp programmet FrendaLink.exe* som ligger installerat i ImageBank programkatalog (ex C:\Program Files (x86)\ImageBank\FrendaLink.exe).
4. **Argument**. Här bygger man upp en argumentlista på den info som skall skickas till ImageBank. Kopiera nedanstående och klistra in i argument:

-s [SSN] -f "[FIRSTNAME]" -l "[LASTNAME]" -p [ID] -r

5. Klicka i förvald om du vill att den skall visas på huvudmenyn. Avsluta med att klicka på **[Spara]**
6. Testa FrendaLink genom att ladda en patient och klicka på "ImageBank" på huvudmenyn.

**OBS! I tidigare versioner av ImageBank så kan filen FrendaLink.exe saknas. Om du inte hittar programmet så finns den att ladda ner på www.ImageBank.se, , lägg filerna isåfall i ImageBank programmap (ex C:\Program Files (x86)\ImageBank\).*